


## BABY GO

Tavola spinale pediatrica modulabile

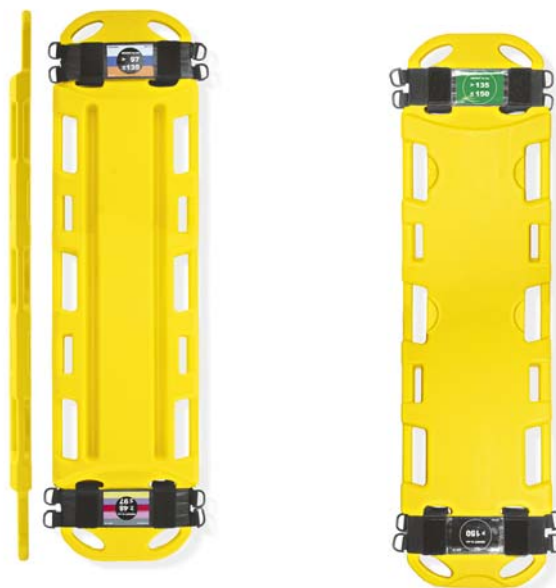

Il bambino è un mondo a parte, non va confuso con il concetto di “piccolo uomo”. Ecco perché nasce un supporto tecnologico studiato appositamente per i piccoli pazienti.

Per bilanciare la grande prominenza occipitale del paziente pediatrico, il torace deve essere sollevato con uno spessore appropriato, a partire dal bordo delle scapole sino alla base della spina dorsale.

Baby Go è un supporto professionale che ottimizza il posizionamento del bambino e consente di mantenere la spina dorsale in posizione neutrale ed avere un allineamento ottimale delle vie respiratorie.

Ecco perché abbiamo plasmato una tavola spinale con quattro diversi profili, per garantire un corretto allineamento del bambino a seconda della corporatura. Baby Go viene fornita con quattro cuscini di spessori diversi che consentono una perfetta immobilizzazione di tutti i pazienti pediatrici.

### Dati Tecnici

Dimensioni	320*45*1200h
Peso	4 kg
Portata	30 kg
Temperatura di utilizzo	Da -20° a + 60°

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
E-mail: [info@spencer.it](mailto:info@spencer.it) Web: <http://www.spencer.it>

I vostri dati sono conservati negli archivi cartacei ed informatici della nostra ditta per finalità contrattuali, informative e commerciali; Qualora non desideraste più essere contattati o non desideraste più ricevere informazioni dalla scrivente, sarà sufficiente comunicarlo inviando un' e-mail al seguente indirizzo: [privacy@spencer.it](mailto:privacy@spencer.it); I vostri dati verranno così immediatamente distrutti dai ns. archivi.

Sistema di Garanzia di Qualità per la produzione ed il controllo finale dei prodotti certificato dall'organismo notificato T.V Product Service GMBH.

Tutti i diritti sulla riproduzione di queste informazioni sono riservati.

Le informazioni e le specifiche sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.  
Spencer Italia S.r.l. declina ogni responsabilità in merito ad errori o inesattezze pubblicate in questa scheda.

Cod. ST02141 B

